

全自動固相抽出装置ST-L300 配管接続図(作成中)

2014年12月08日 作成

目次

- 表紙
- 目次
- 注意書き
- シリンジ1溶媒吸引液選1
- シリンジ1溶媒吸引液選2
- シリンジ1溶媒吐出
- シリンジ2溶媒吸引
- シリンジ2溶媒吐出Lノズル
- シリンジ2溶媒吐出Sノズル
- シリンジ3溶媒吸引
- シリンジ3溶媒吐出Lノズル
- シリンジ3溶媒吐出Sノズル
- シリンジ4溶媒吸引
- シリンジ4溶媒吐出Lノズル
- シリンジ4溶媒吐出Sノズル
- シリンジ5溶媒吸引液選5
- シリンジ5溶媒吸引液選6
- シリンジ5溶媒吐出Lノズル
- シリンジ5溶媒吐出Sノズル
- シリンジ6溶媒吸引
- シリンジ6溶媒吐出Wノズル
- シリンジ7溶媒吸引液選7
- シリンジ7溶媒吸引液選6
- シリンジ7溶媒吐出Wノズル
- シリンジ8溶媒吸引
- シリンジ8溶媒吐出Lノズル
- シリンジ8溶媒吐出Sノズル

注意書き

本資料に記載の容量は目安であり、
それぞれの装置によって若干の差異があります。

本資料についてのご質問は以下の連絡先をお願いいたします。

株式会社アイスティサイエンス


サポートサービス部


Tel : 073-475-0033

E-mail : as-support@aisti.co.jp

STQ-B type


シリンジ1ー溶媒吸引液選1(アセトニトリル)

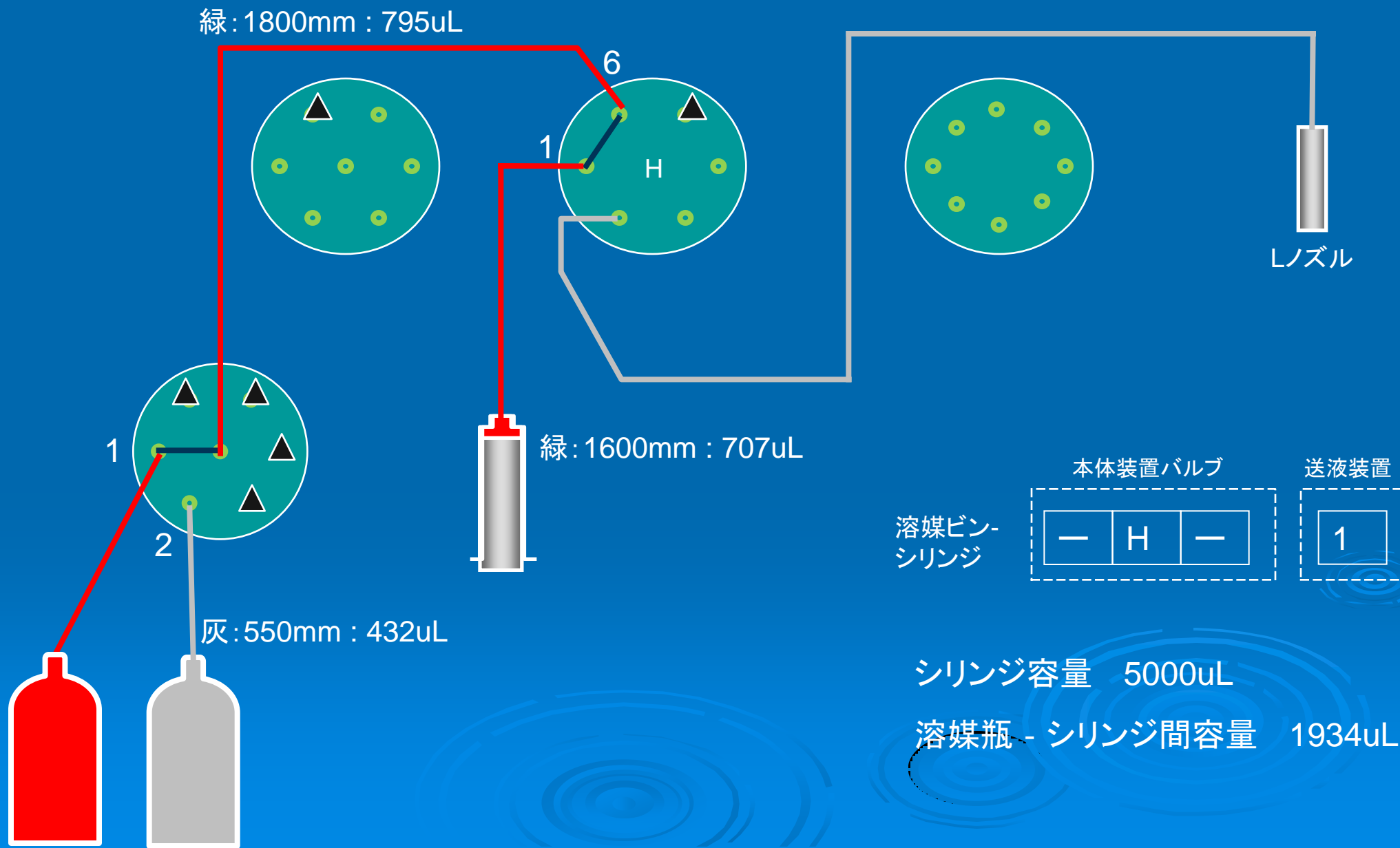

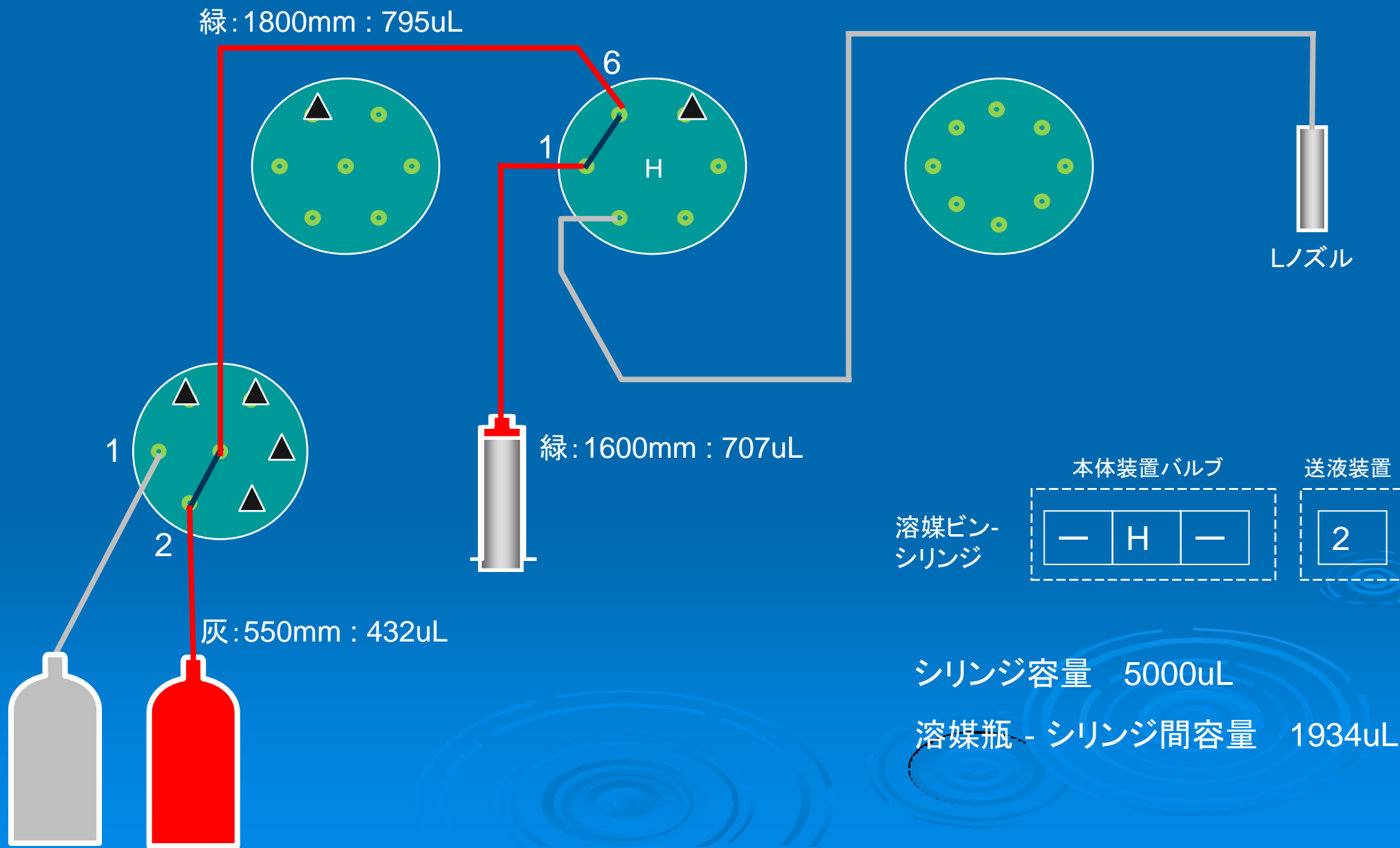


STQ-B type

シリンジ1試料吸引・溶媒吐出

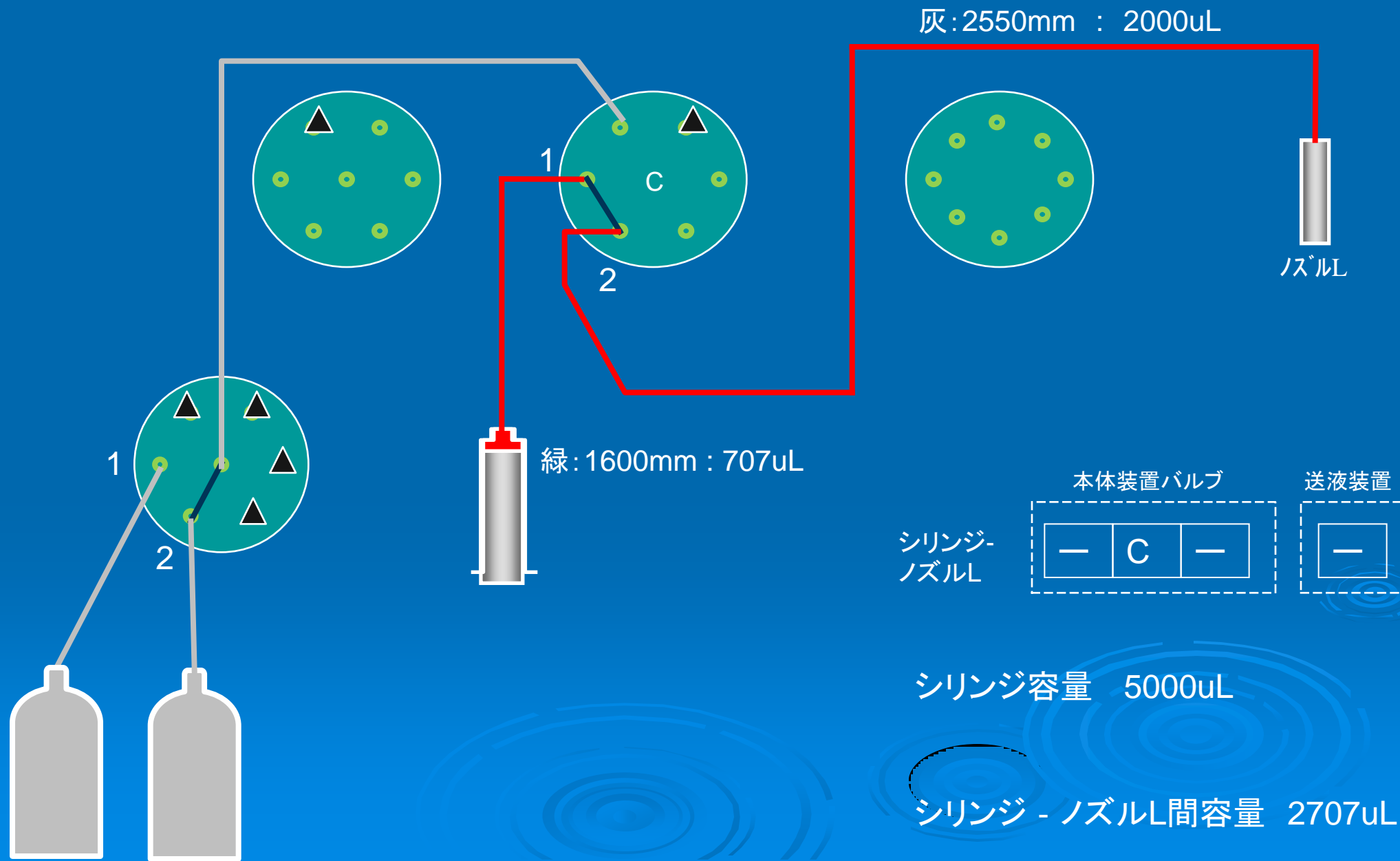

STQ-B type

シリンジ2ー溶媒吸引 (MeOH-水 4/1)

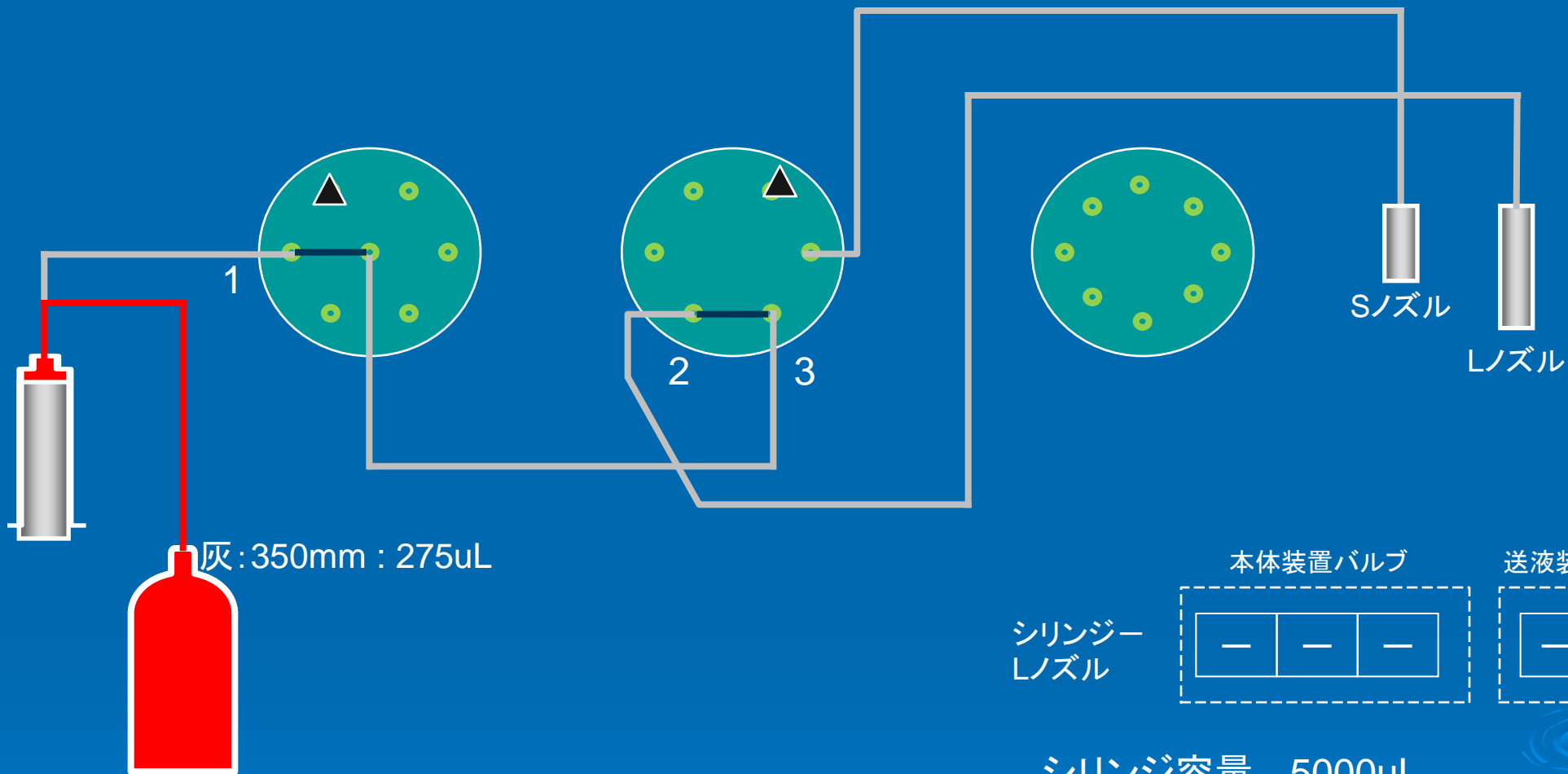


灰: 350mm : 275uL

本体装置バルブ

送液装置

シリンジ
Lノズル


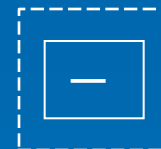


シリンジ容量 5000uL

溶媒瓶 - シリンジ間容量 275uL

STQ-B type

シリンジ2ー溶媒吐出Lノズル

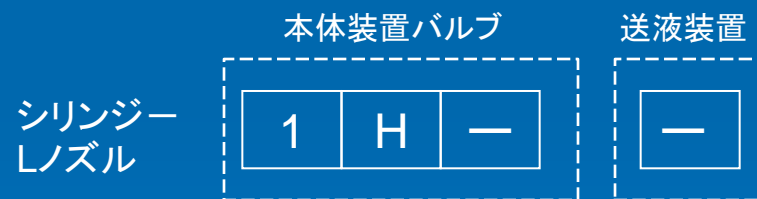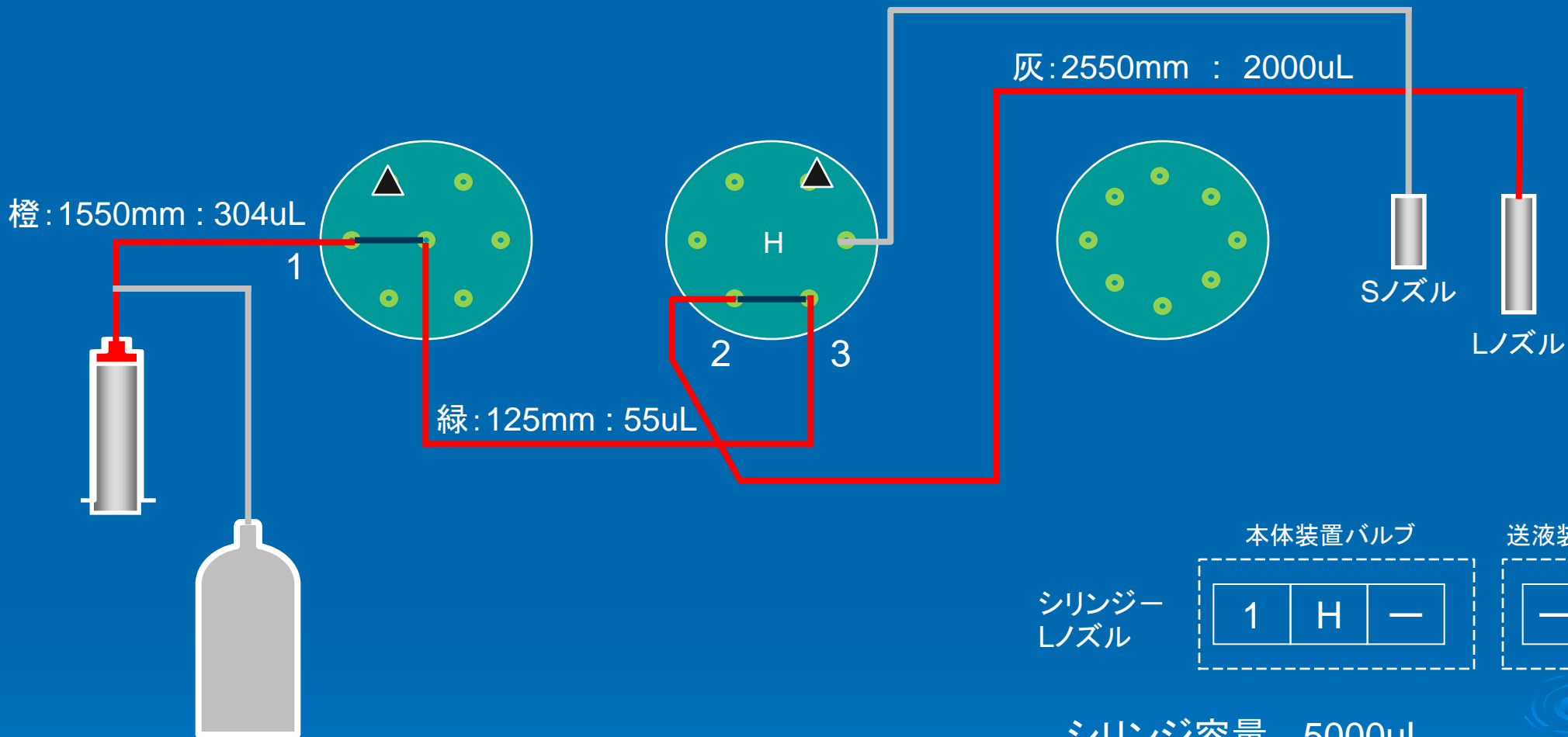


シリンジ容量 5000uL

シリンジ - Lノズル間容量 2359uL

STQ-B type

シリンジ2ー溶媒吐出Sノズル

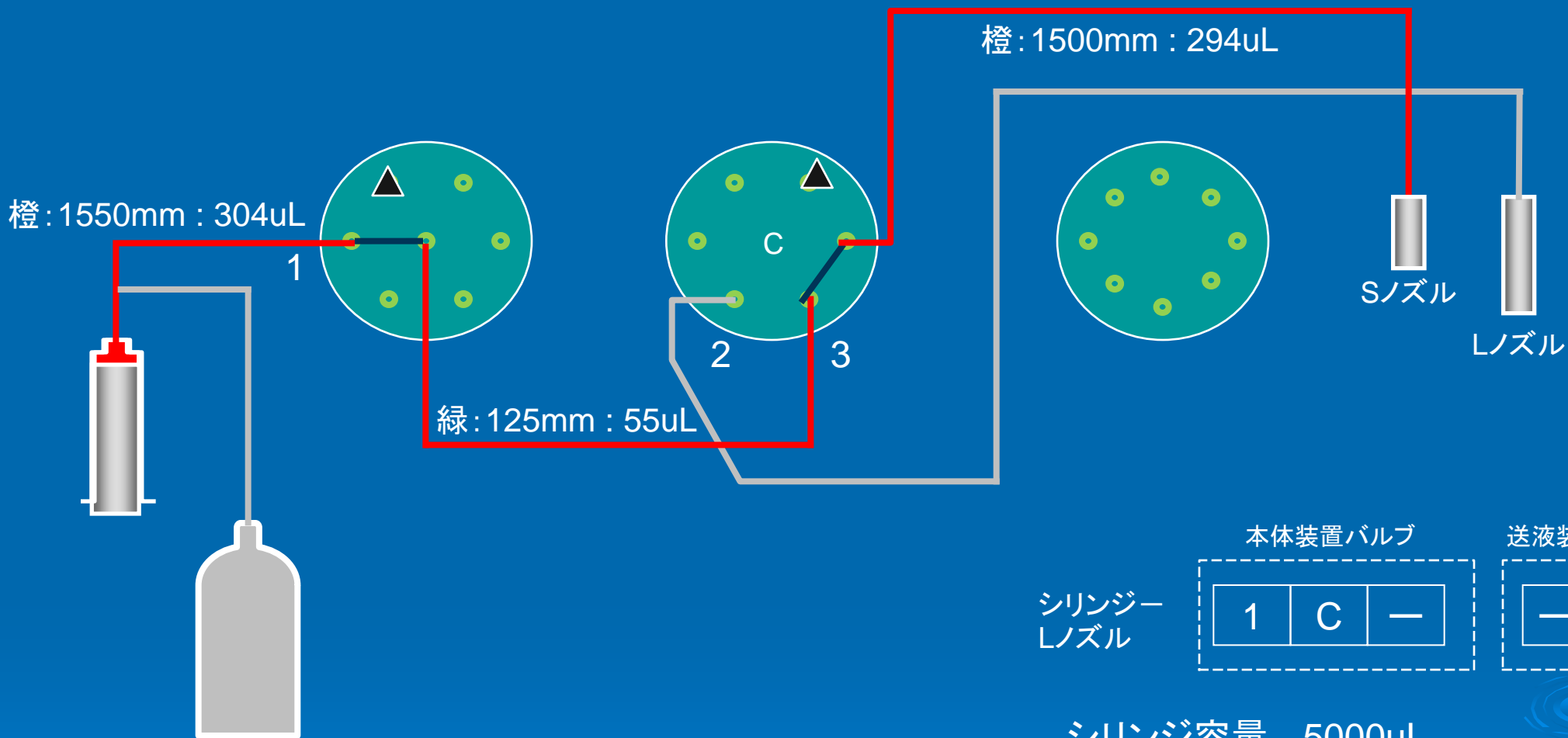

	本体装置バルブ	送液装置				
シリンジー Lノズル	<table border="1"><tr><td>1</td><td>C</td><td>—</td></tr></table>	1	C	—	<table border="1"><tr><td>—</td></tr></table>	—
1	C	—				
—						



シリンジ容量 5000uL

溶媒瓶 - シリンジ間容量 275uL

シリンジ - Sノズル間容量 653uL

STQ-B type

シリンジ3ー溶媒吸引(アセトン)

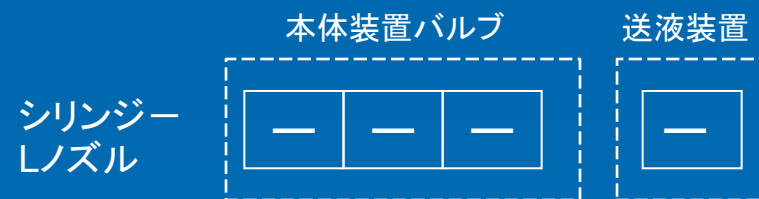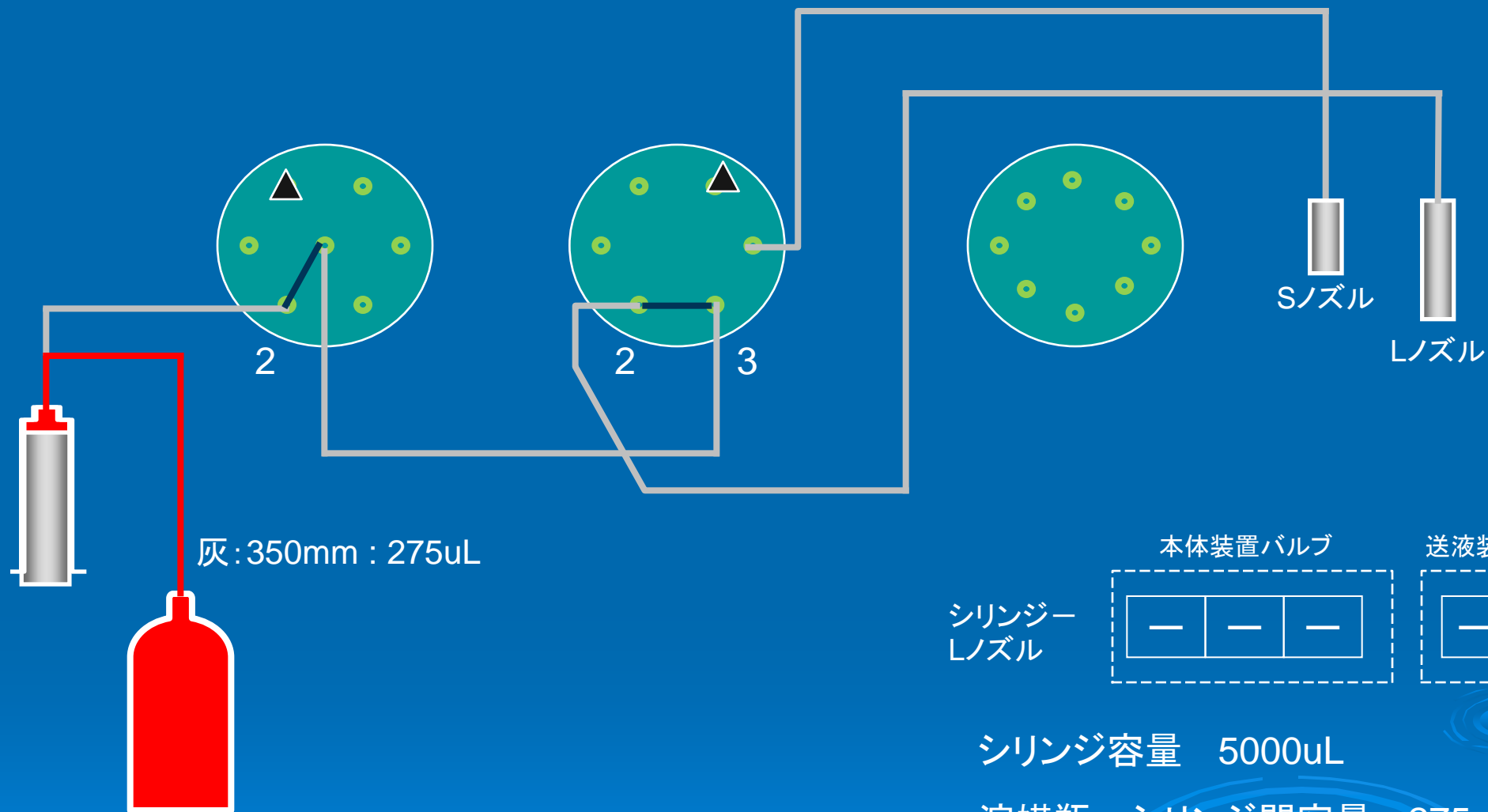


シリンジ容量 5000uL

溶媒瓶 - シリンジ間容量 275uL

STQ-B type

シリンジ3—溶媒吐出Lノズル

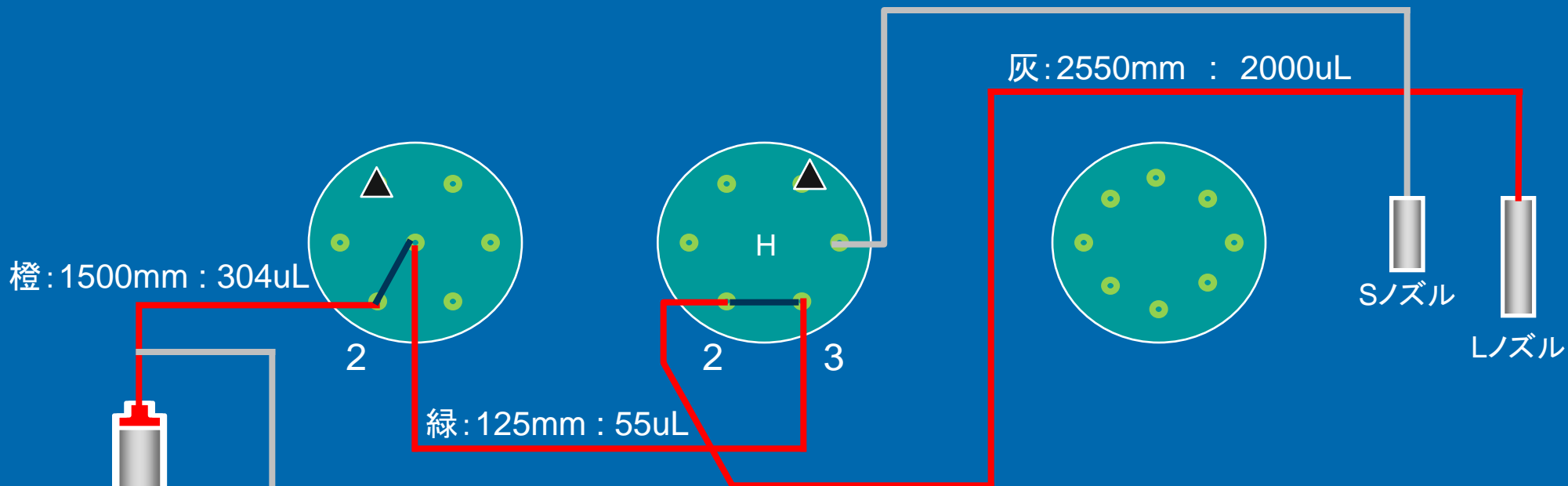

橙 : 1500mm : 304uL

緑 : 125mm : 55uL

灰 : 2550mm : 2000uL

Sノズル

Lノズル

本体装置バルブ

送液装置

シリンジ—
Lノズル




シリンジ容量 5000uL

シリンジ - Lノズル間容量 2359uL

STQ-B type

シリンジ3ー溶媒吐出Sノズル

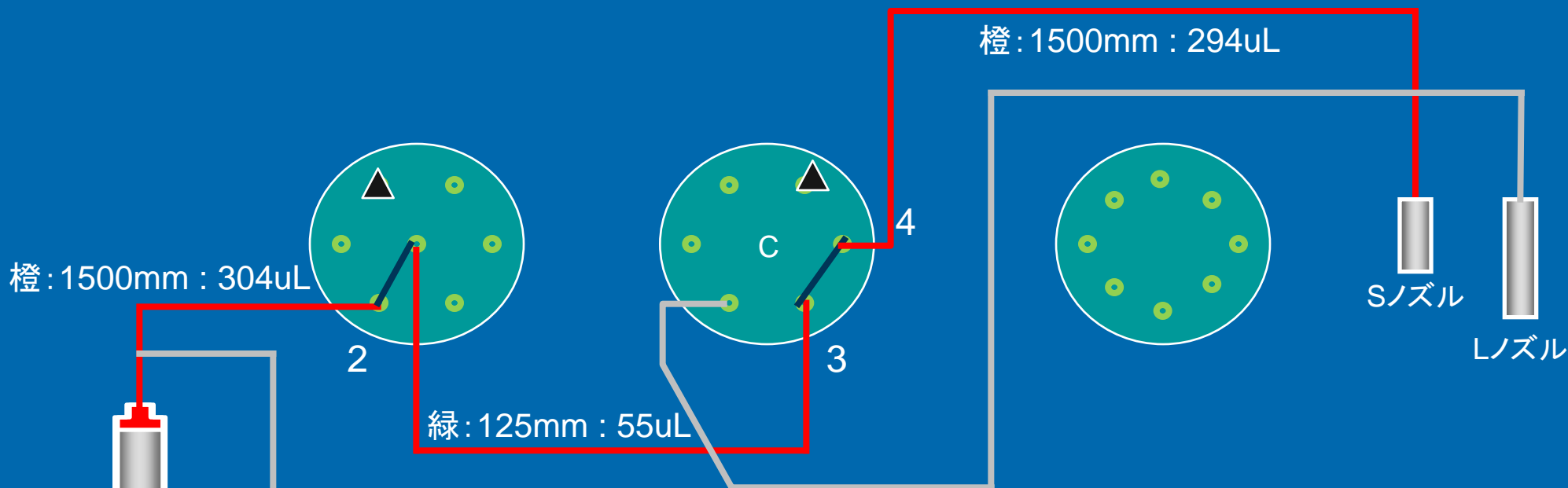


	本体装置バルブ			送液装置
シリンジー Sノズル	2	C	—	—

シリンジ容量 5000uL

シリンジ - Sノズル間容量 653uL


STQ-B type

シリンジ4ー溶媒吸引(AT-Hex 15/85)

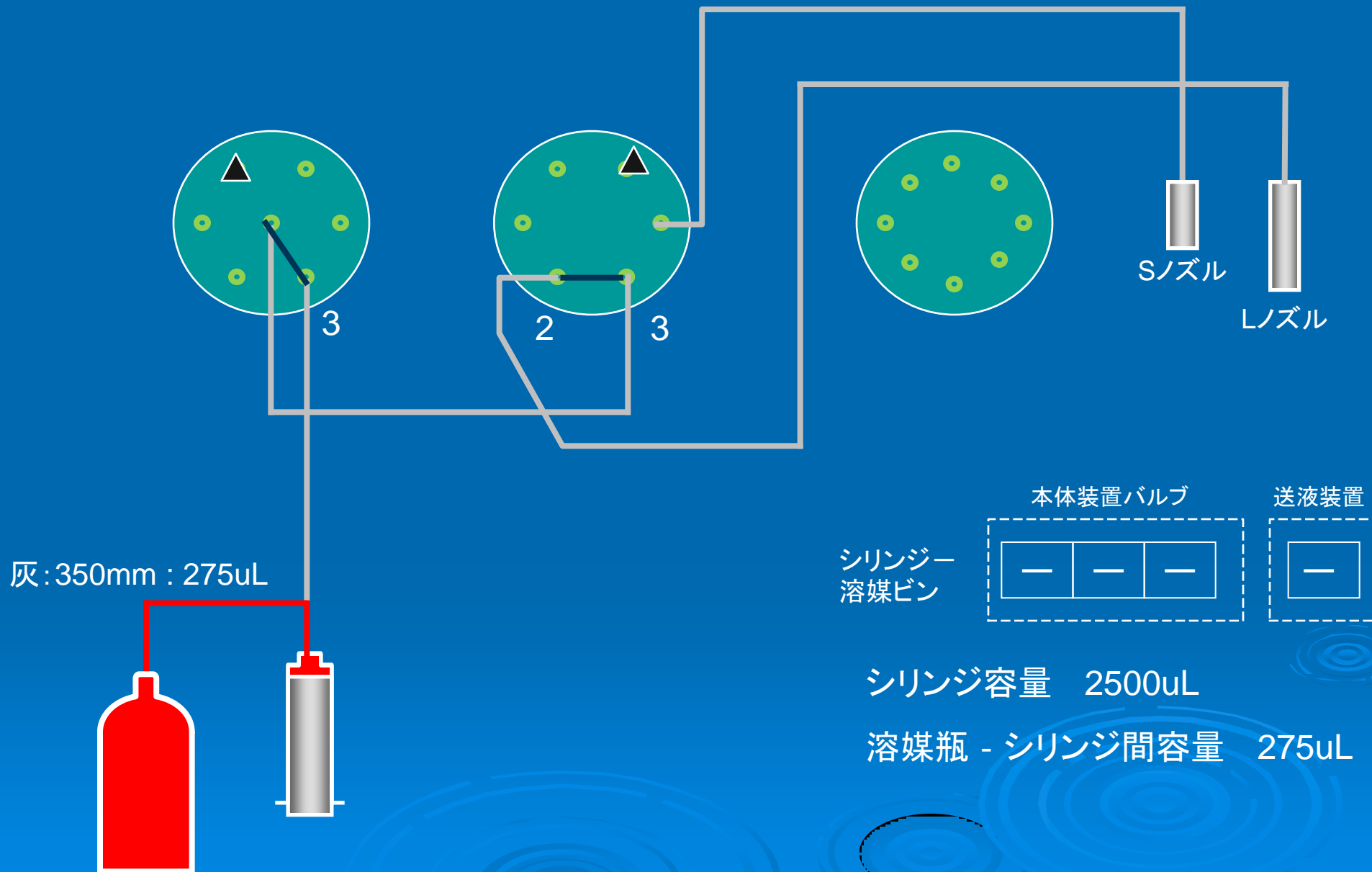


STQ-B type

シリンジ4ー溶媒吐出Lノズル

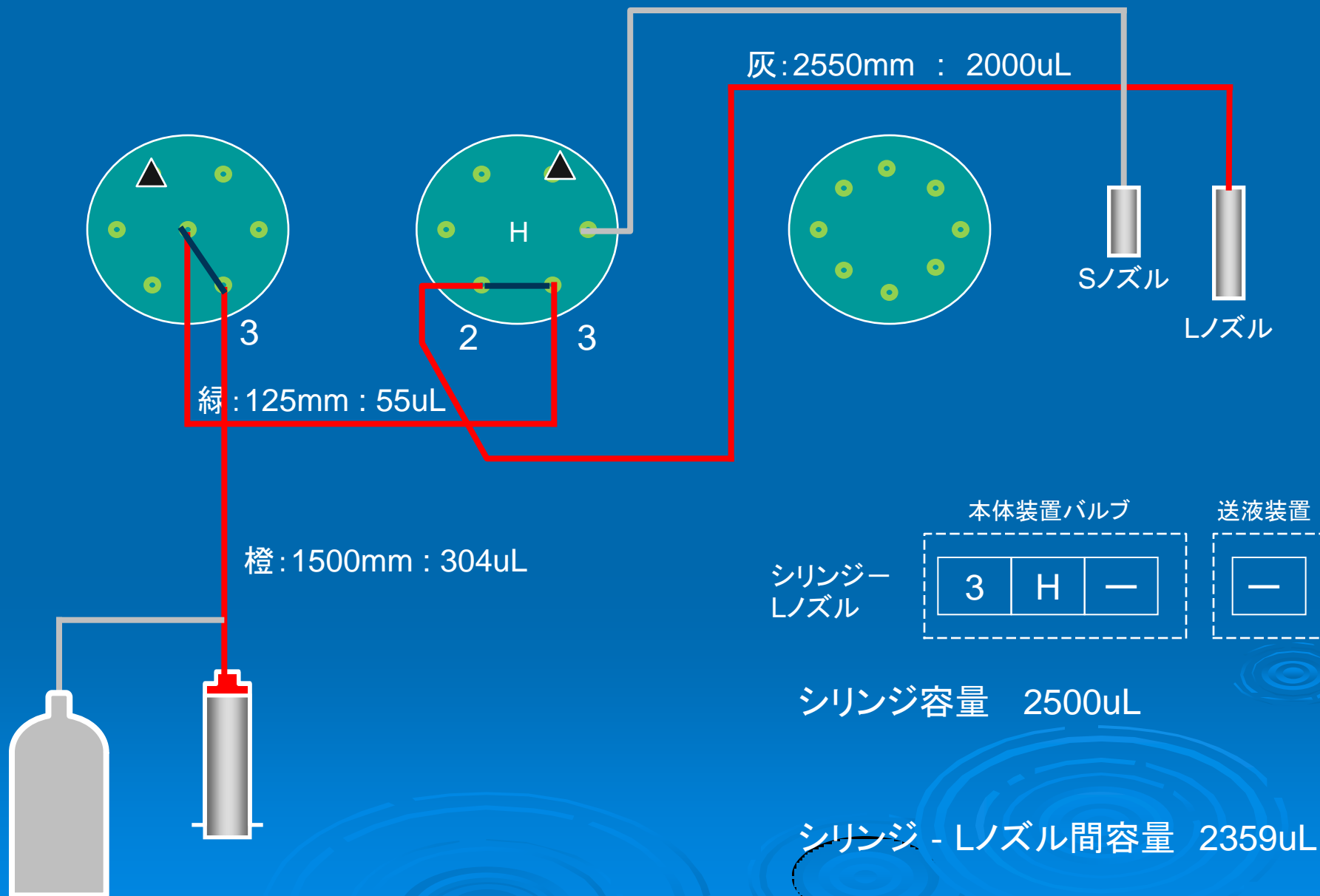


STQ-B type

シリンジ4ー溶媒吐出Sノズル

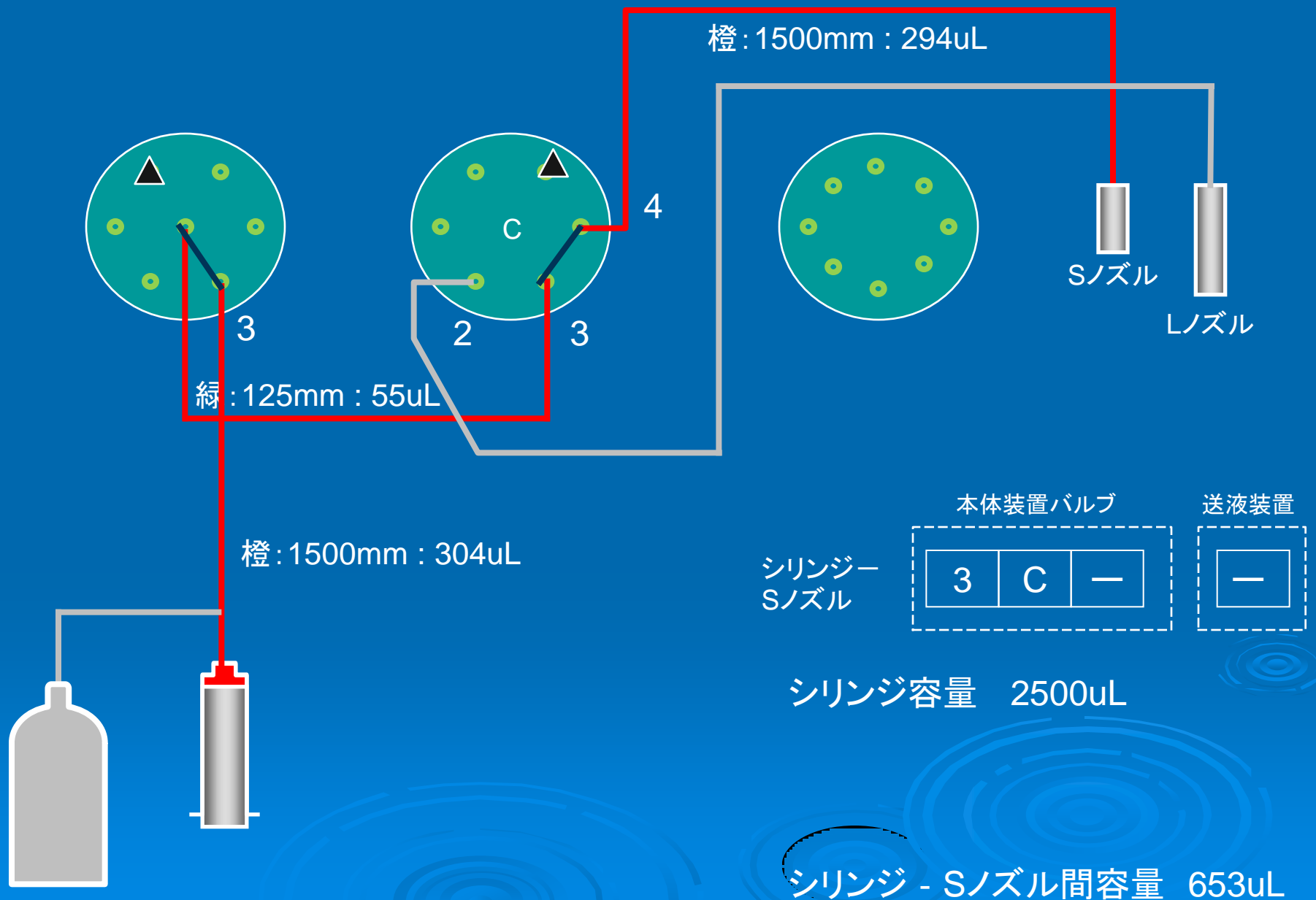


STQ-B type

シリンジ5—溶媒吸引液選5(ギ酸MeOH)

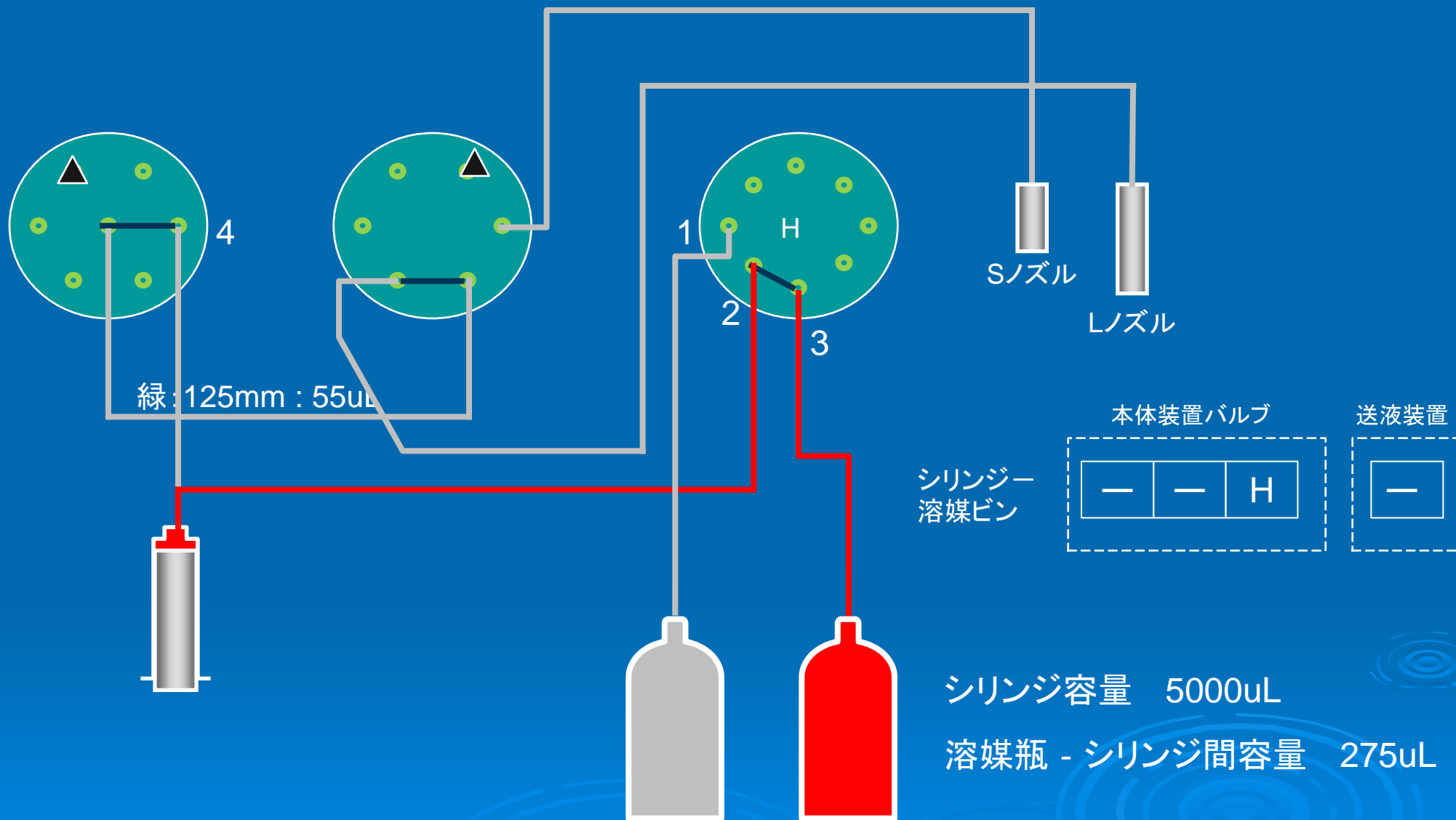


STQ-B type

シリンジ5ー溶媒吸引液選6(超純水)

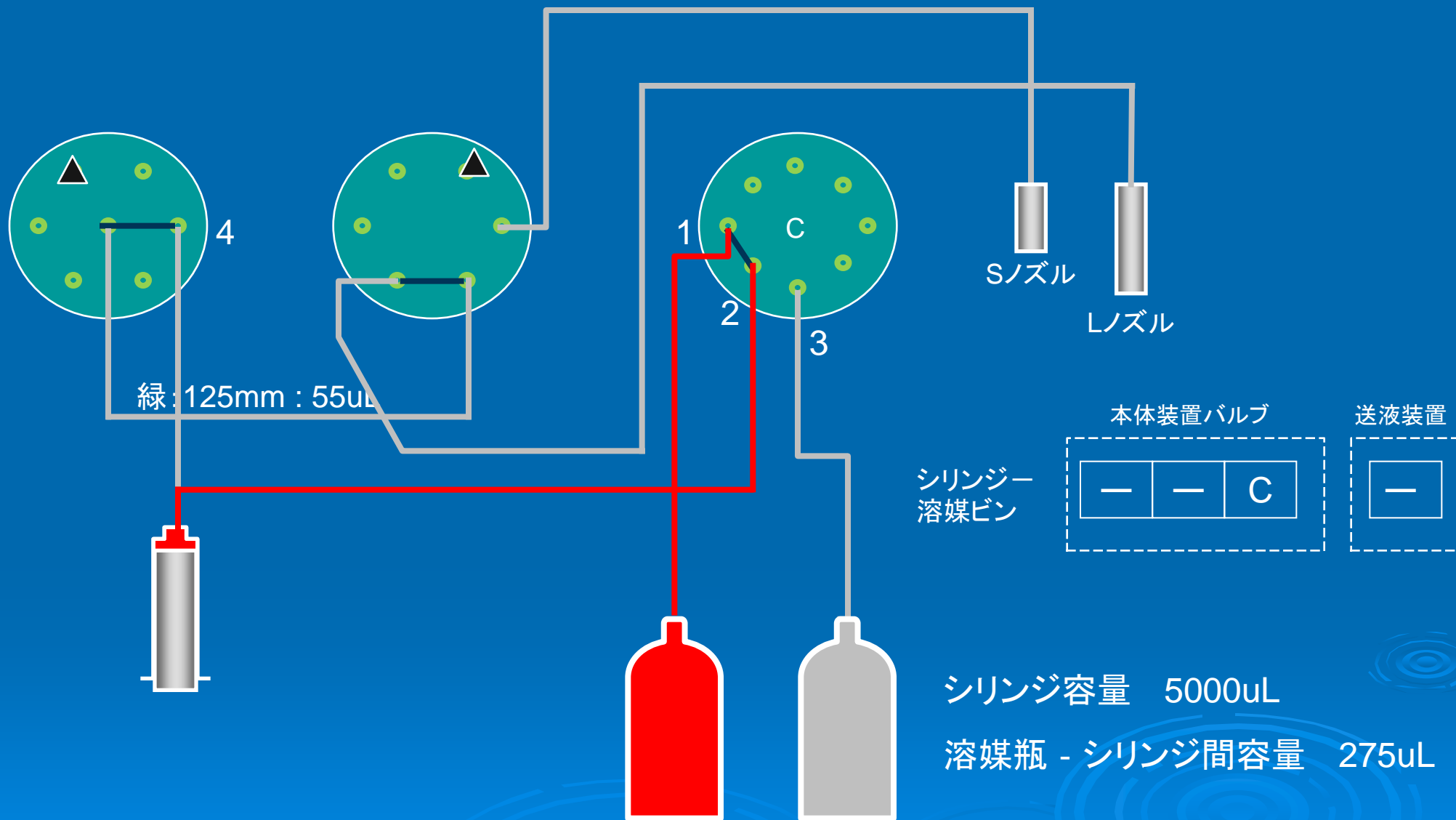


STQ-B type

シリンジ5ー溶媒吐出Lノズル

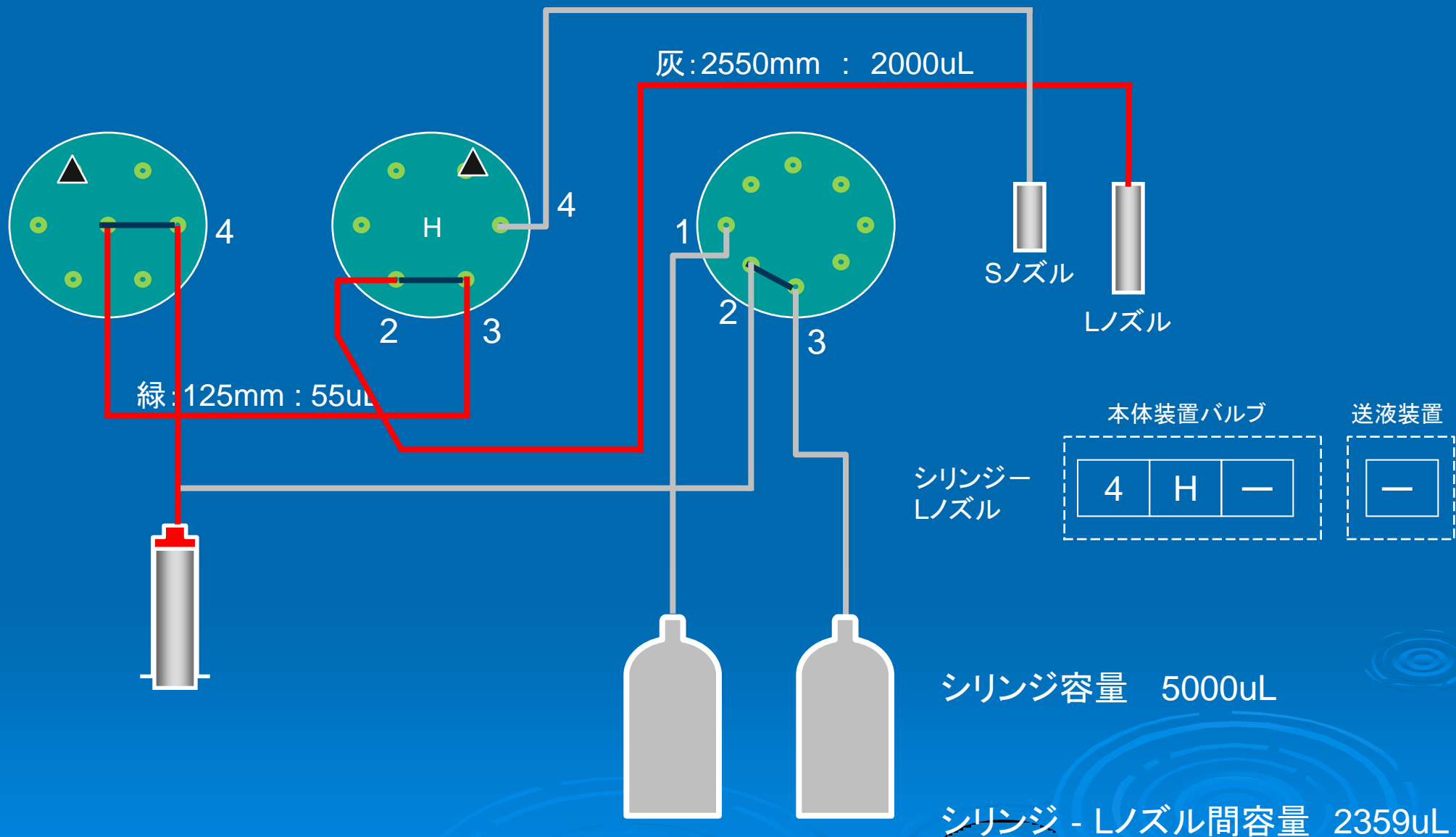


STQ-B type

シリンジ5ー溶媒吐出Sノズル

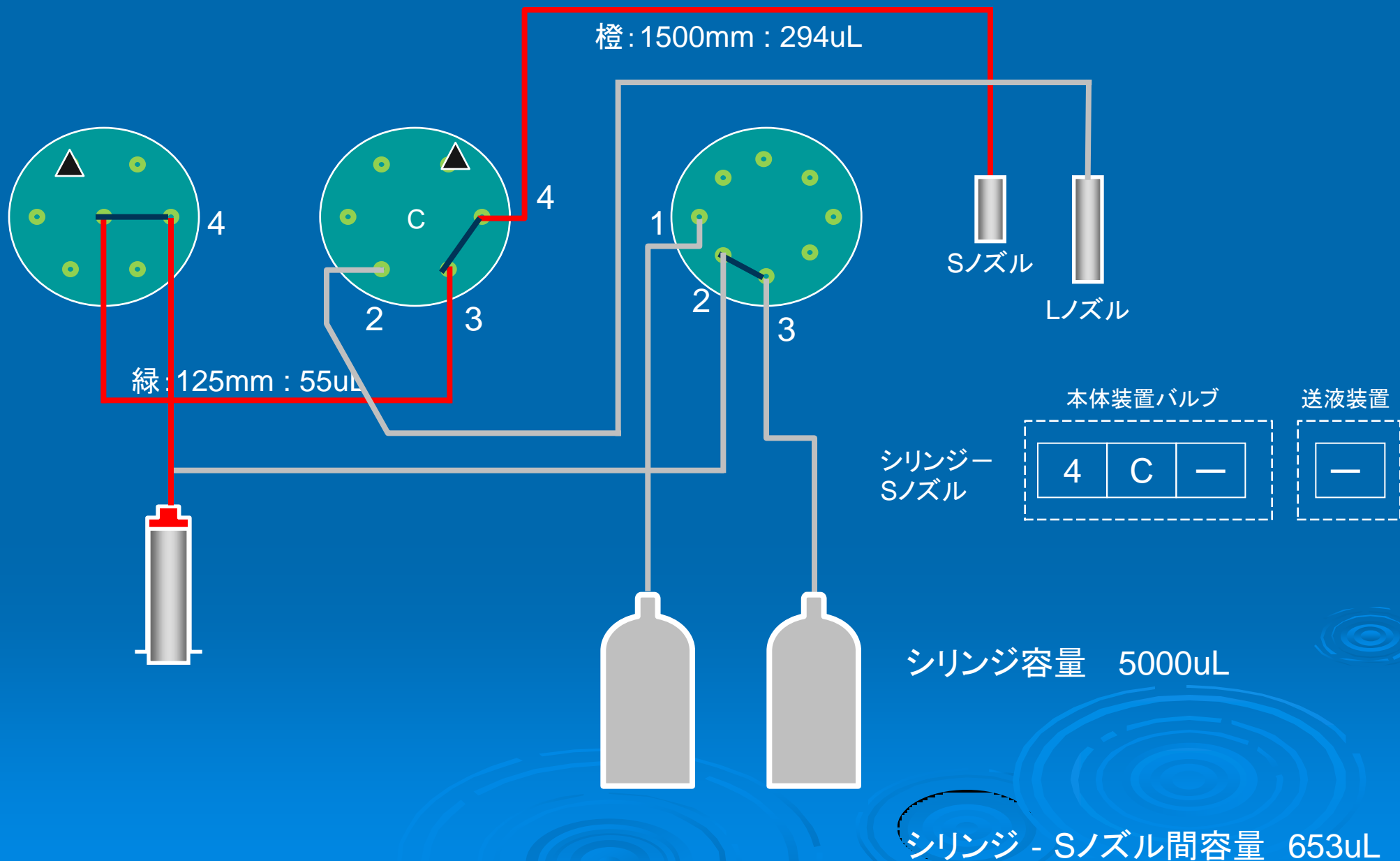




STQ-B type

シリンジ6—溶媒吸引(超純水)

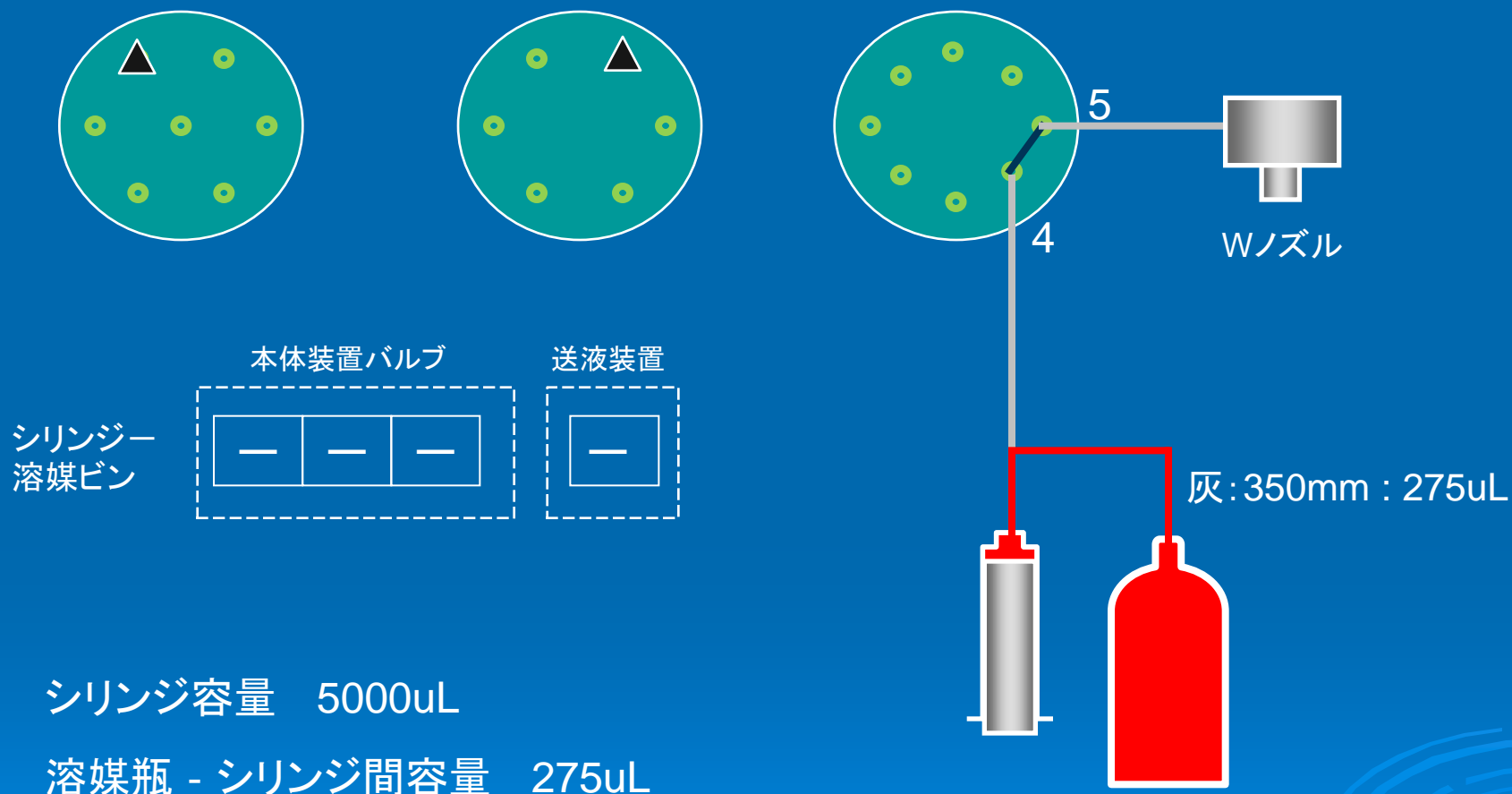

STQ-B type

シリンジ6—溶媒吐出Wノズル

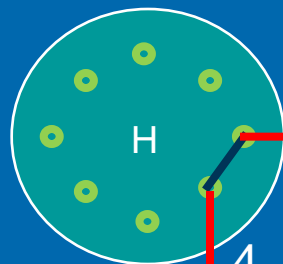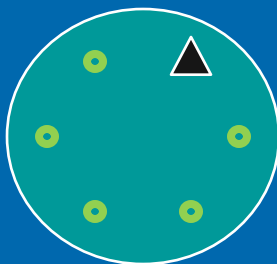
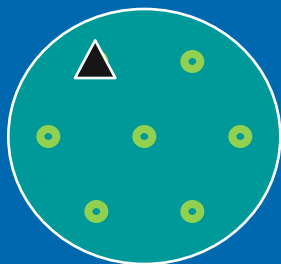


緑: 1000mm : 442uL



Wノズル

緑: 1500mm : 662uL

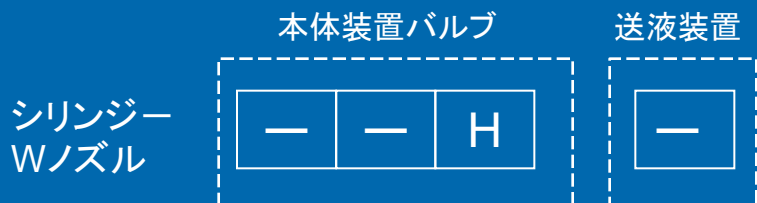
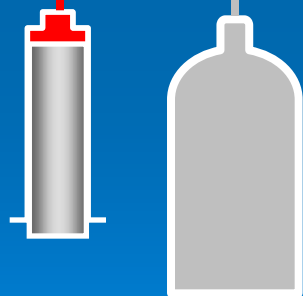


シリンジ容量 5000uL

シリンジ - Wノズル間容量 1104uL


STQ-B type

シリンジ7ー溶媒吸引液選7(食塩水)

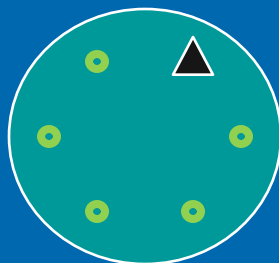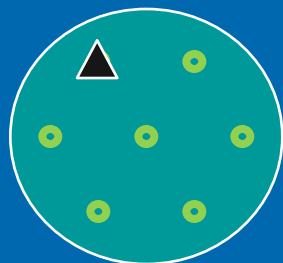


シリンジー
食塩水ビン

本体装置バルブ

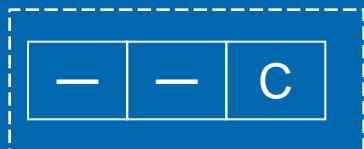


送液装置

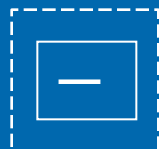



シリンジ容量 25000uL

溶媒瓶 - シリンジ間容量 2983uL

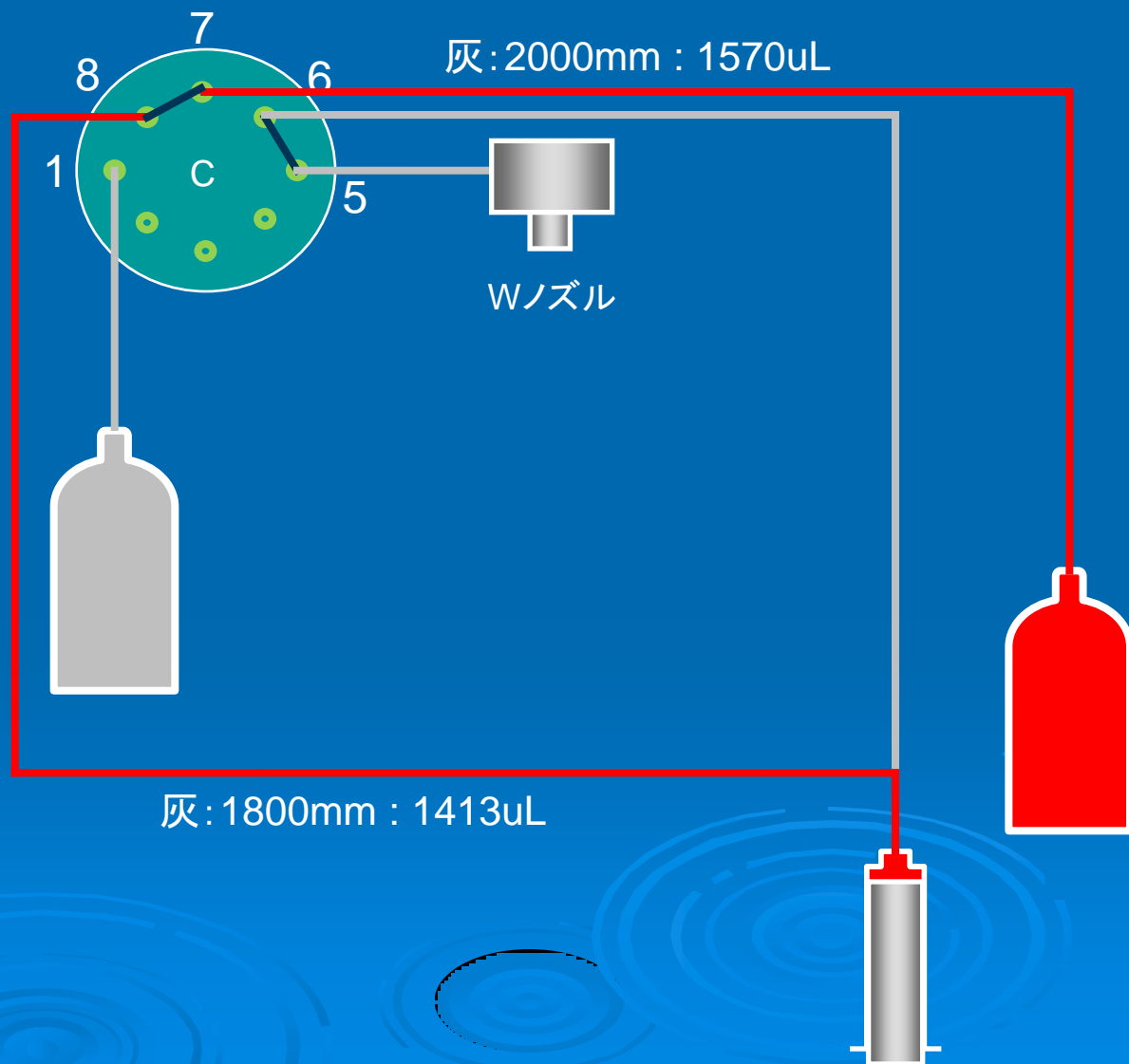

STQ-B type

シリンジ7ー溶媒吸引液選6(超純水)

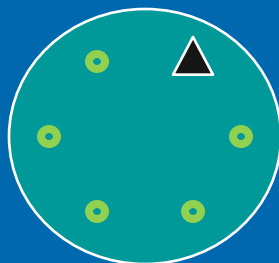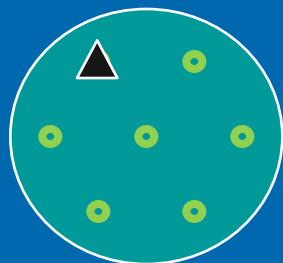


シリンジ
溶媒ビン

本体装置バルブ




送液装置

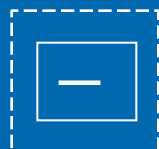




シリンジ容量 25000uL

溶媒瓶 - シリンジ間容量 2903uL

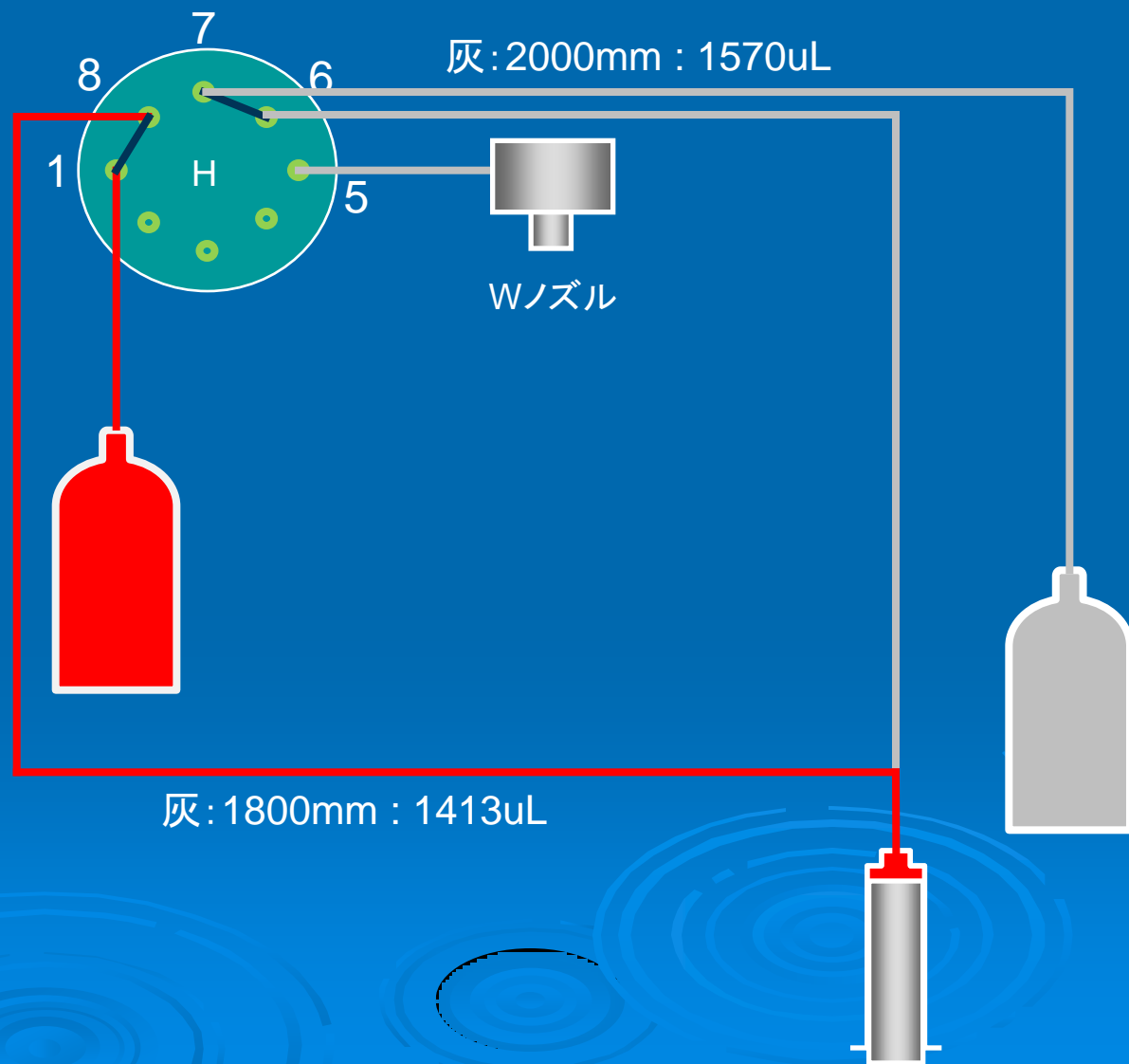

STQ-B type

シリンジ7ー溶媒吐出Wノズル

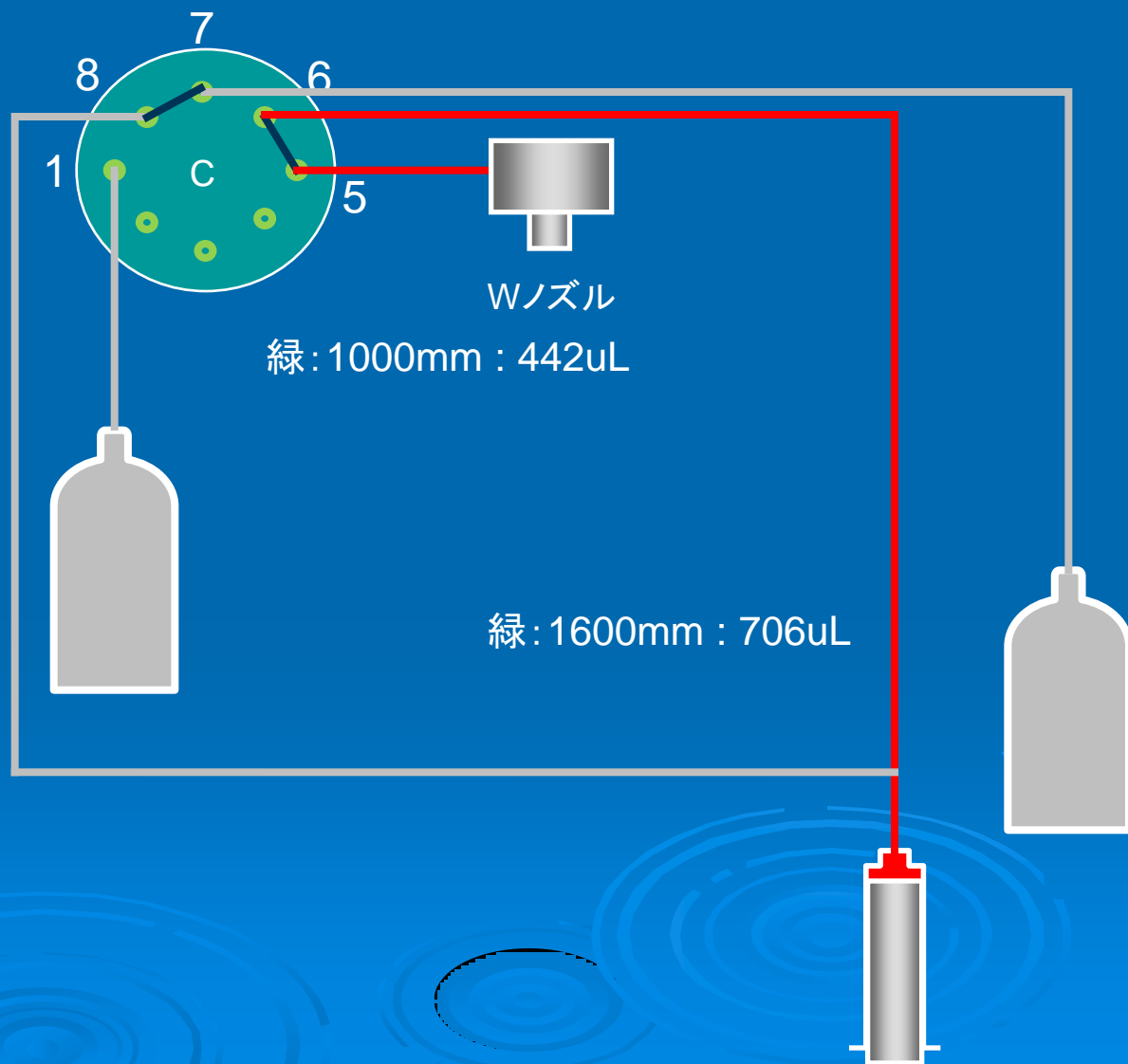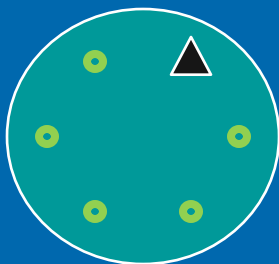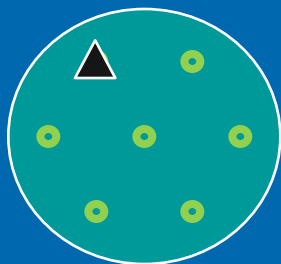

Wノズル


緑: 1000mm : 442uL

緑: 1600mm : 706uL

本体装置バルブ

送液装置

シリンジー
Wノズル

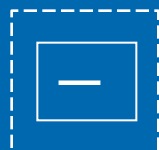


シリンジ容量 25000uL

シリンジ - ノズル間容量 1148uL


STQ-B type

シリンジ8ー溶媒吸引(ヘキサン)

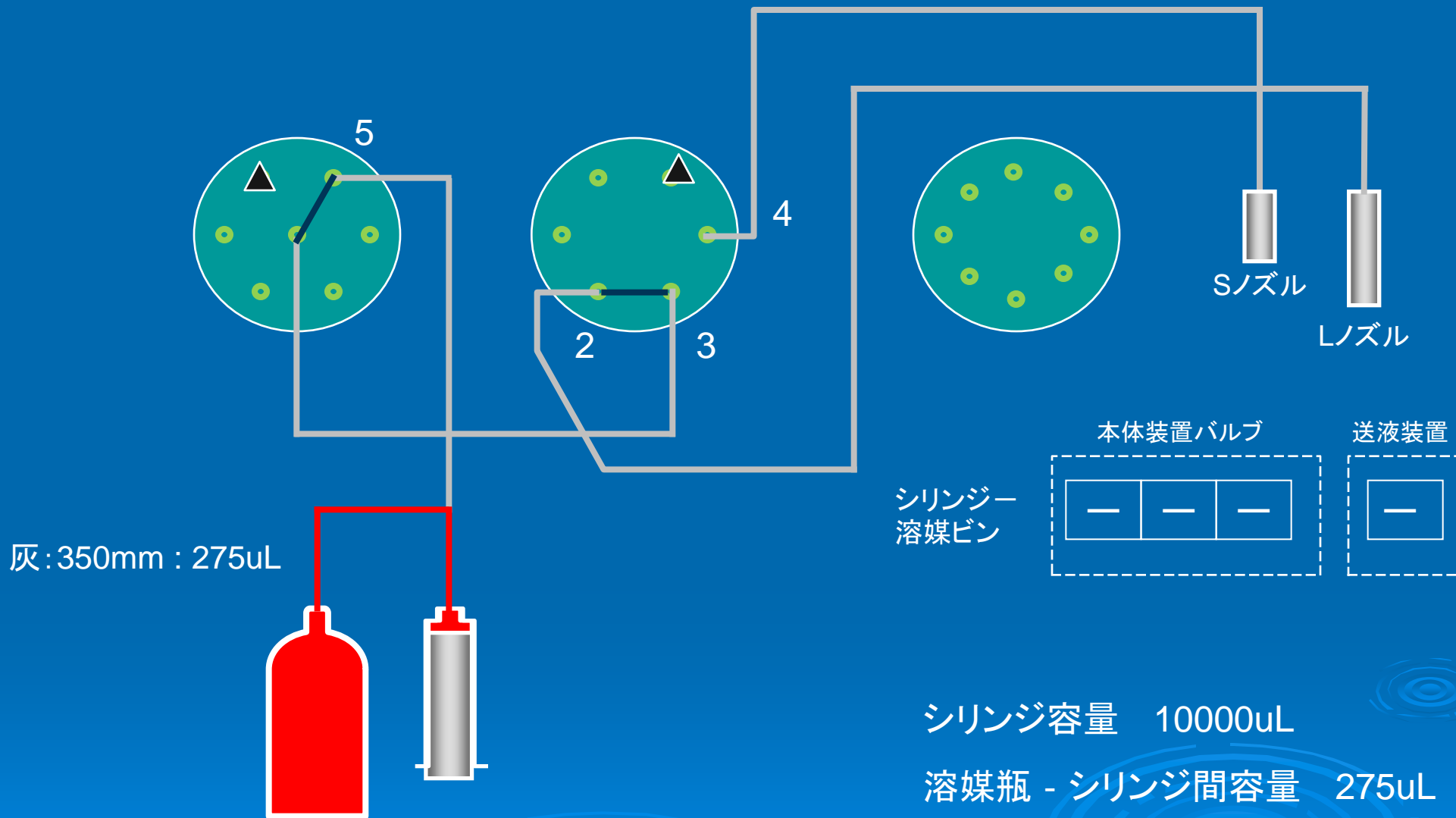

STQ-B type

シリンジ8—溶媒吐出Lノズル

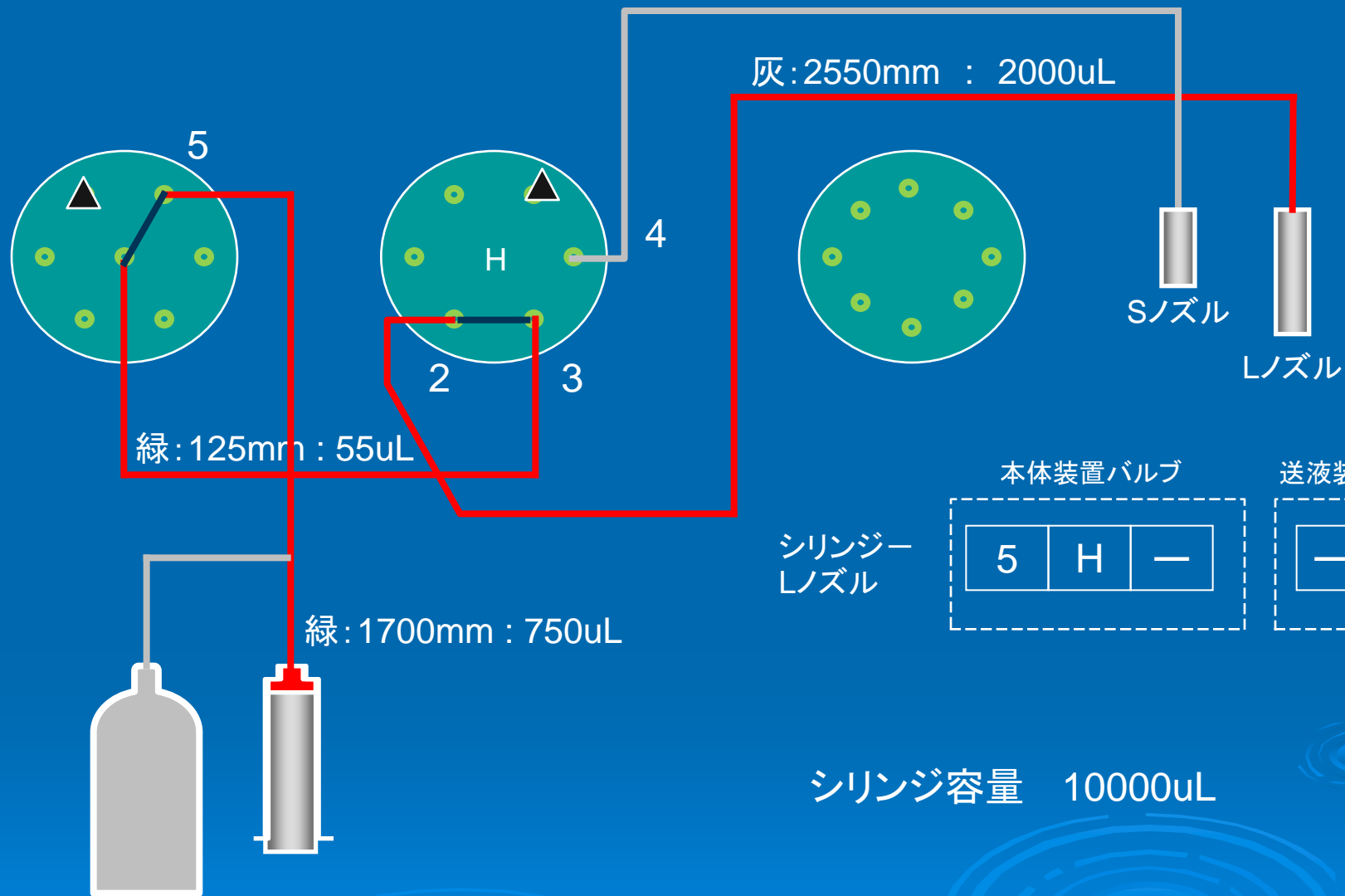

シリンジ容量 10000uL

シリンジ - Lノズル間容量 2760uL

STQ-B type

シリンジ8ー溶媒吐出Sノズル

